


Z-Act Celite Test Tüpleri ve Cihazı

CELITE AKTİVATÖRLÜ KANAMA ZAMANI TAYINI İÇİN CAM TÜP

Act Celite Test tüpleri Aktive edilmiş pıhtılaşma süresinin tayini amacı ile üretilmiştir. Aktivatör olarak Celite® Kullanılmıştır. Genel olarak Z-Act tüpleri, heparin kullanılan tüm tıbbi ve cerrahi işlemler sırasında ve sonrasında kullanılabilir. Z-Act test tüpleri tüm tüplü cihazlar (Actalyke® ve Hemochron®) ile uyumludur.

Z-Act celite, Normal veya uzayan pıhtılaşma değerinin tayini için aşağıdaki metodu izler. Cam tüp içerisine konulan 2.00 cc taze kan, aktivatör ile karıştırılarak uzayan pıhtılaşma değerinin makul seviyelere indirir, pıhtının oluştuğu anda durur ve kullanıcıyı sesli olarak uyarır. Tüm işlemler sırasında içinde kan olan Act tüpünün sıcaklığı 37 dercede sabit tutulur.

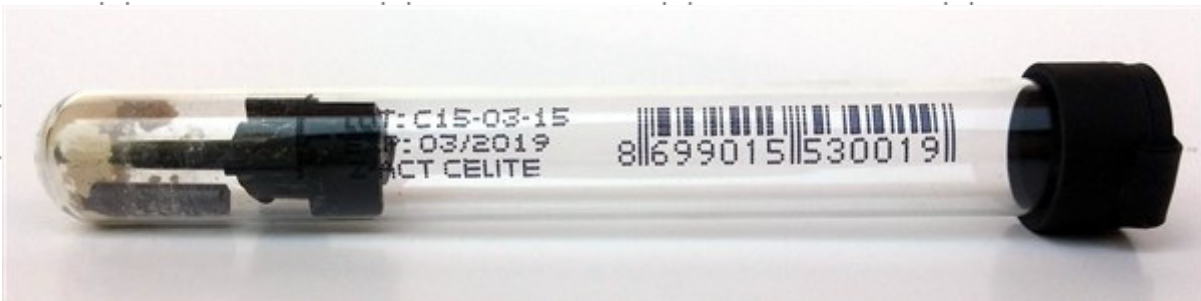

Z ACT deTERMINATOR MODEL 250

Kalibrasyon gerektirmeyen çalışma prensibi ile iş yükünüzü azaltan model 250 yeni paslanmaz metal kasası ile daha kullanışlı.

Kullanıcı dostu ara yüz (İngilizce/Türkçe)

Tek tuş ile tüm fonksiyonlar

Dahili batarya

Çift nokta pıhtı tespiti ile daha hasas ve doğru sonuç verir

Her marka ACT Tüpü ile kullanılır

Düşük enerji tüketimi (ayrı ayrı kullanılabilen iki ayrı test bölümü)

Tekrar programlanabilir uygun altyapı

Teknik Özellikler

Çalışma Aralığı : 0-1500 Saniye

Ölçüler : 22,5x16x15 cm

Test bölümü : İki ayrı test

